



Your Power for Health

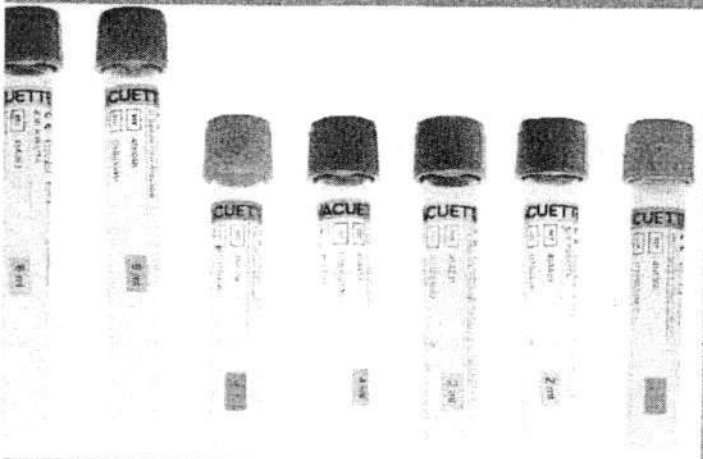


greiner bio-one

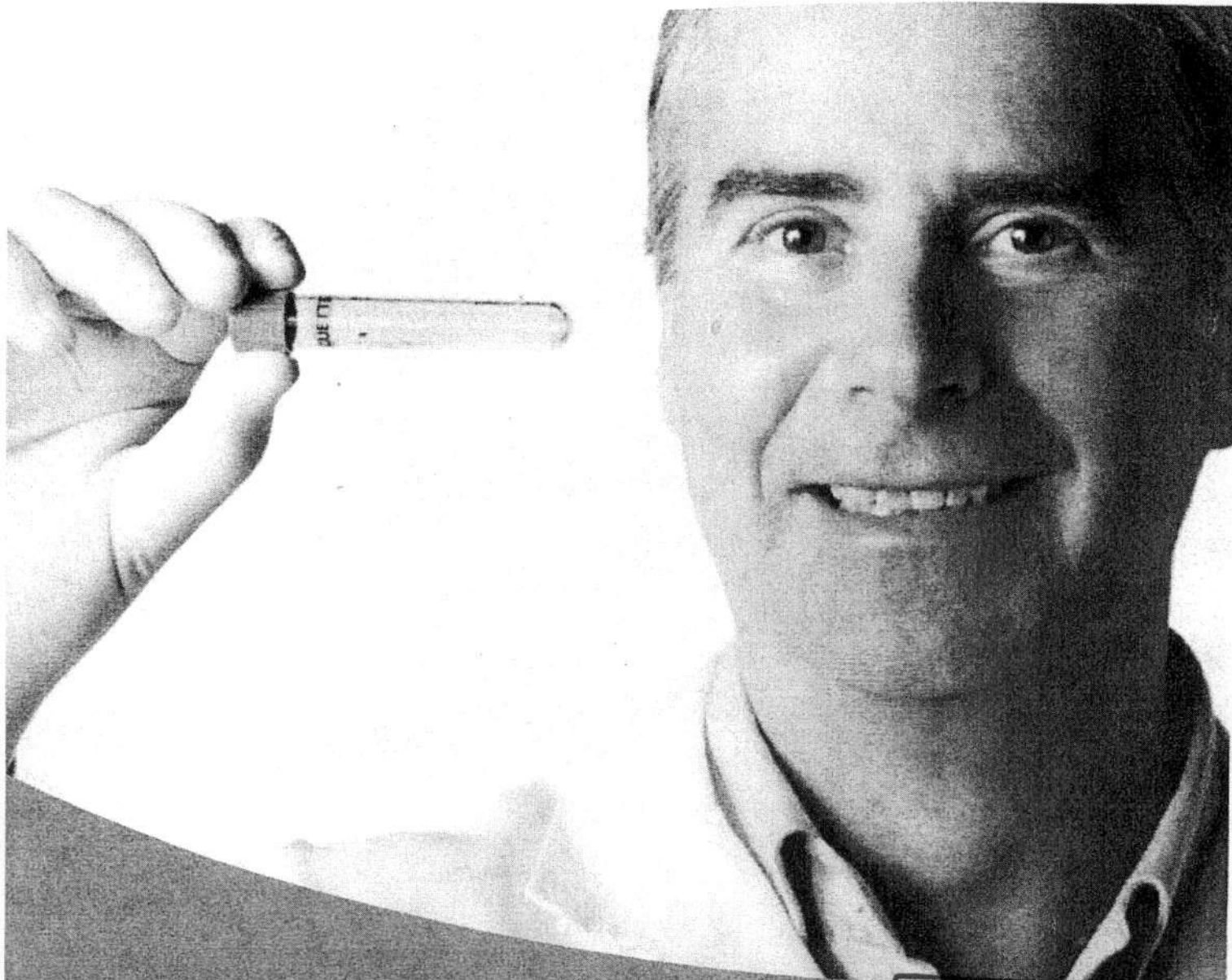


VACUETTE

Specimen Collection
System TR-L


Our Innovations
for Your Safety

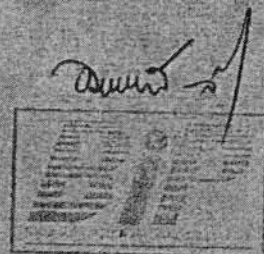


www.gbo.com/preanalytics

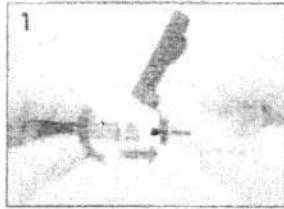


1 Thread the needle into the needle holder. Ensure that the needle is firmly seated in the holder. Leave the remaining section of the cover in place.

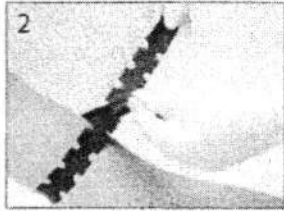


2 Apply tourniquet if required and disinfect the venipuncture site.

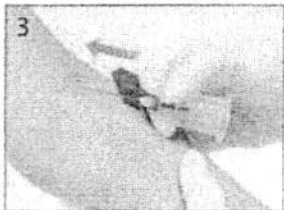


3 Place the patient's arm in a downward position and insert the needle into the vein as usual.

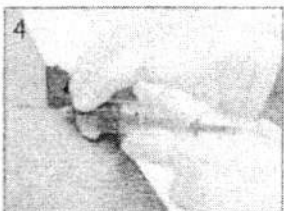

4 Push the tube into the holder and onto the needle valve puncturing the rubber stopper. Hold in place with the thumb. The prespecified vacuum of the tube allows the required quantity of blood to flow into the tube.

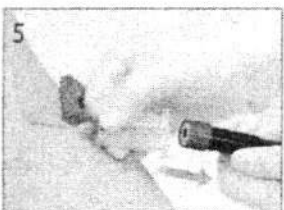

5 Remove the tourniquet as soon as blood appears in the tube. When the first tube is full and the blood flow ceases, remove it from the holder. Further samples can then be collected by inserting more tubes into the holder.

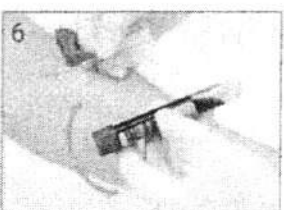

6 In order to ensure correct mixing of the sample with the additives, gently invert the tubes 5-10 times immediately following collection. After the last tube has been drawn and the blood flow ceases, remove the needle from the vein.





7 Activate the safety mechanism with the aid of solid surface or thumb upon removal of the needle from the patient's vein. An audible click indicates that the safety shield has been fully activated.





8 Dispose of the needle together with holder in a sharps disposal container specially intended for this purpose.


Components

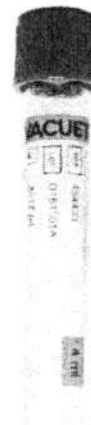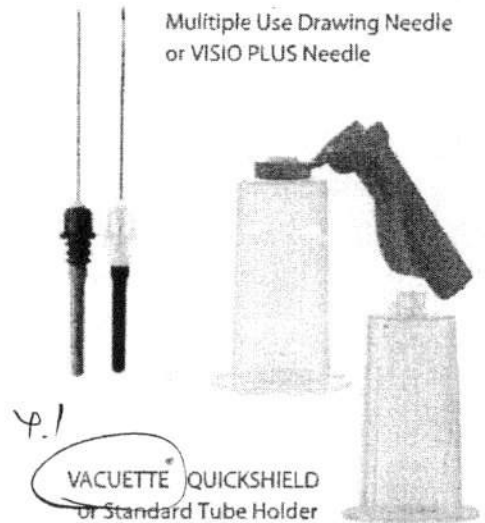

Tube Label

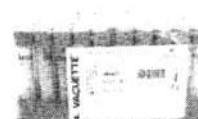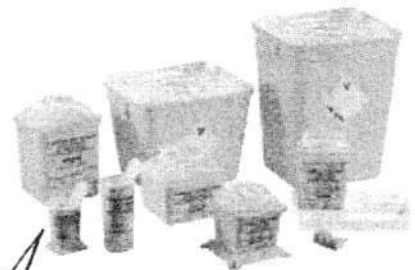

Our Innovations for Your Safety

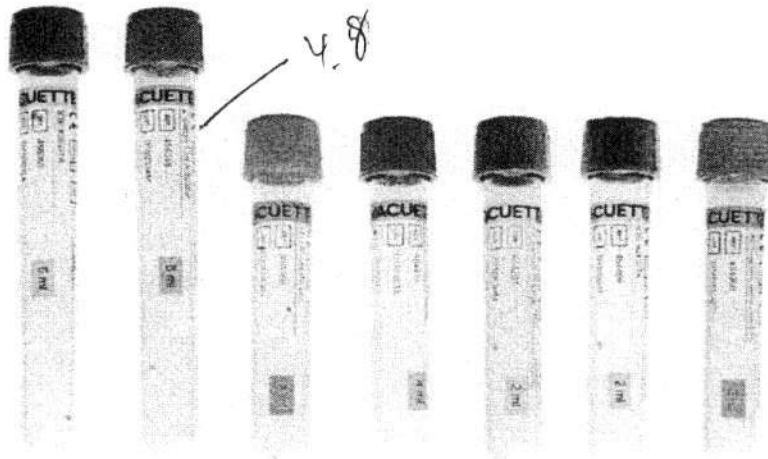

The VACUETTE system combines the advantages of vacuum technology with unique safety characteristics for the patients and the users.

Specification

- 4.3 ✓ Clear as glass but virtually unbreakable
- ✓ Screw caps for increased safety and simplified opening
- Colour coded rings offer additional visual identification of tube characteristics
- Longer shelf-life due to tube design
- Compatible with all common analyser systems
- Fill-line on each tube for simple visual check
- Preventing mistake in case of opening and recapping through the same color of tube label and cap

Safety

- Virtually unbreakable during centrifugation, handling and transportation
- All VACUETTE tubes are sterile
- Reproducibility of test results is guaranteed
- Fast & reliable test results
- VACUETTE Sandwich tube with special double wall technology; the ultimate standard for coagulation tests
- Incineration of VACUETTE tubes is environmental friendly as PET breaks down into 3 natural components: carbon, hydrogen and oxygen


Standards

- 4.11 VACUETTE products are US FDA approved
- Manufacturing complies with EC directives and US regulations (ISO 9001, ISO 13485, GMP)
- Products can be used according to recommendations by WHO and CLSI





New fill-level mark
for 1ml, 2ml, 3ml
and 3.5ml

4.2

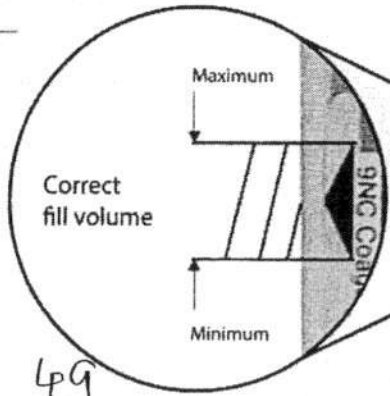

4.9

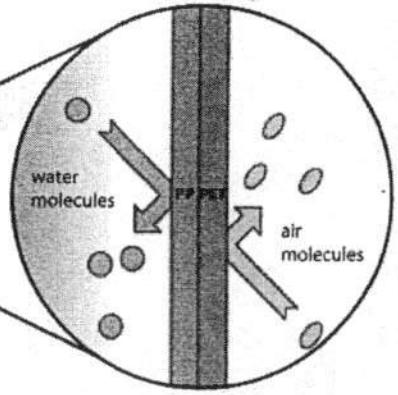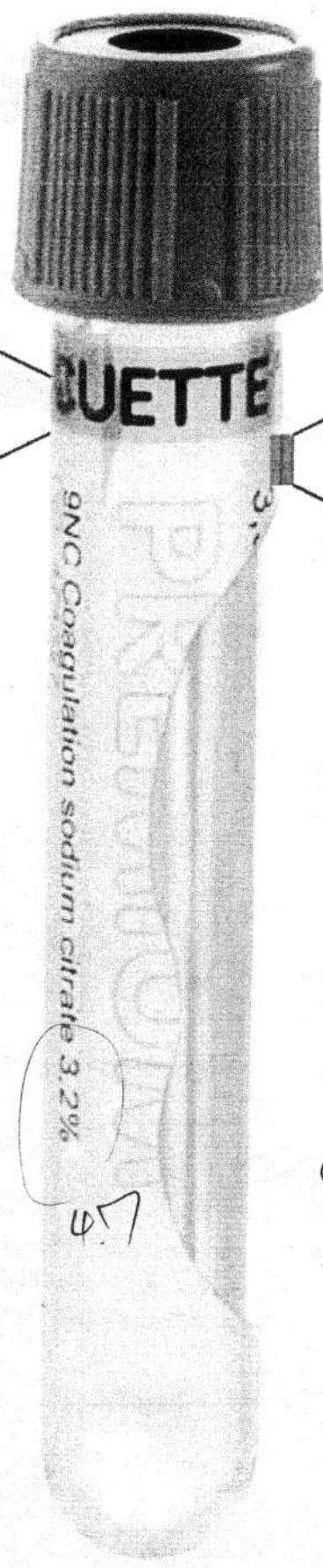

New fill-level mark for correct mixing ratio and correct results

A new fill-level mark in the form of an arrow tip clearly indicates the minimum and maximum fill level, as well as the nominal fill level. This ensures a reliable, correct blood to additive ratio.

The correct mixing ratio of venous blood and sodium citrate is ensured during blood collection, so that the tube contains 1 part sodium citrate solution to 9 parts blood.

Immediately after blood collection, gently invert the coagulation tube 4 times without shaking. This ensures that the blood is mixed thoroughly with the additive.

The inner tube is made out of polypropylene (PP) and prevents the citrate solution from evaporating

4.3

Polypropylene (PP) is ideal for sensitive coagulation parameters, due to its inert characteristics

4.7





Coagulation
Clinical Chemistry
Haematology
Specialities

Letter code	Tube Size in mm	13/75				13/100		16/100		9/120		
		Vol. in ml		2	3	3.5	4	5	6	8	9	1.5
Z	Serum Clot Activator	PREM/NR	PREM/NR		PREM/NR		PREM/NR		NR			
Z	Serum Clot Activator + Gel			PREM/NR		PREM/NR		NR	NR			
LH	Lithium Heparin	PREM/NR	PREM/NR		PREM/NR		PREM/NR		NR			
LH	Lithium Heparin + Gel		NR		PREM/NR	PREM/NR		NR				
NH	Sodium Heparin				PREM/NR		PREM/NR		NR			
9NC	Trisodium citrate solution	PREM/NR	PREM/NR	PREM/NR								
K3E	K3 EDTA	PREM/NR	PREM/NR	PREM/NR	PREM/NR	PREM	PREM/NR			NR		
K2E	K2 EDTA	PREM/NR	PREM/NR		PREM/NR	PREM/NR	PREM/NR			NR		
K2E	K2 EDTA + Gel				PREM/NR	PREM/NR		NR				
FX	Sodium fluoride Potassium oxalate	PREM/NR	PREM		PREM/NR		PREM					
FE	Sodium fluoride EDTA K3	PREM/NR			PREM/NR							
ESR	Trisodium citrate	PREM										CC



PREM = PREMIUM (Safety Twist Cap), NR = Non-ridged (pull cap)

VACUETTE Coagulation

These tubes are used for determinations in citrated plasma for coagulation testing. The recommended, buffered sodium citrate solution 3.2% (0.109mol/l) functions as anticoagulant by chelating calcium. The proportion of blood to sodium citrate anticoagulant volume is 9:1.

VACUETTE Serum

Serum Tubes are used for determinations in serum for clinical chemistry, microbiological, serology, immunology and TDM. The tubes are coated with a clot activator. The recommended clotting time is >=30 minutes. Serum Gel Tubes allow storage of certain parameters under the recommended storage conditions according to their biological half-life in separated serum.

VACUETTE Heparin Plasma

The tubes are used for determinations in heparinised plasma for clinical chemistry. The heparin concentration is standardised: 18 I.U. of lithium-, sodium- or ammonium salt of heparin per 1ml. Plasma Gel Tubes allow storage of certain parameters under the recommended storage conditions according to their biological half-life in separated plasma.

VACUETTE EDTA

EDTA Tubes are used for determinations in EDTA whole blood for haematology and immunohaematology. The tube interior of EDTA Tubes is spray dried with 1.2-2mg anhydrous EDTA per 1ml blood.

VACUETTE Glucose


Glucose Tubes are used for the analysis of blood sugar and lactate in stabilised whole blood or plasma. Sodium fluoride is used as glycolysis inhibitor to preserve glucose when combined with an anticoagulant such as potassium oxalate or EDTA.

VACUETTE ESR

Sodium citrate solution 3.2% (0.109 mol/l) is the anticoagulant of choice for the measurement of the ESR. The proportion of blood to sodium citrate anticoagulant volume is 4:1.

Austria (Main Office)
Greiner Bio-One GmbH
Phone +43 7583 6318
Fax +43 7583 6318
E-Mail Office@at.gbo.com
www.gbo.com/preanalytics

Thailand
Greiner Bio-One Thailand Ltd
Phone +66 38 4656 33
Fax +66 38 4656 36
E-Mail Office@th.gbo.com
www.gbo.com/preanalytics

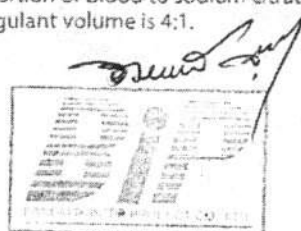

หลุดเก็บเลือดสำหรับตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการจำนวน 6 รายการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วยรวม		ราคารวม	
			บาท		บาท	
1	VACUETTE PLUS K3 EDTA 3.0 ML	250,000 หลอด	2.85		712,500.00	
2	VACUETTE 4.0 ML LITHIUM HEPARIN	280,000 หลอด	2.85		798,000.00	
3	VACUETTE SODIUM CITRATE 3 ML	35,000 หลอด	3.60		126,000.00	
4	VACUETTE SERUM TUBE 6 ML	35,000 หลอด	2.85		99,750.00	
5	MINICOLLECT LITHIUM HEPARIN 1 ML	10,000 หลอด	5.50		55,000.00	
6	MINICOLLECT K3 EDTA TUBE 0.5 ML	5,000 หลอด	5.50		27,500.00	
			ราคารวมภาษี		1,818,750.00	
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม		118,983.65	
			ราคาก่อนรวมภาษี		1,699,766.35	



ราคารวมทั้งสิ้น

หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน

ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอกรอื่นและค่าใช้จ่ายที่ส่งไปไว้ด้วยแล้ว





บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด
Bangkok Inter Products Co., Ltd.

FM 04-04
วันที่ขึ้นใช้ | กุมภาพันธ์ 256
Issue ที่ 4

สำนักงานใหญ่ : 91/247-251 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
Head Office : 91/247-251 Suwinthawong Road, Minburi, Minburi, Bangkok 10510
Tel: (662) 543-7430-5 Fax : (662) 543-7900 E-mail: info@b-i-p.co.th website : www.b-i-p.co.th

เอกสารออกเป็นชุด

ส่งซื้อสินค้าที่ E-mail : adminbip@b-i-p.co.th
E-mail : bip002537@gmail.com

ใบกำกับภาษี
TAX INVOICE

สำเนา
COPY

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105637110503

รหัสลูกค้า 02-ล 001 TAX ID: 0994000159307 สำนักงานใหญ่
Code
Name
ชื่อ
ที่อยู่
Address
กรุงเทพฯ 10500
หมายเหตุ
Remark T.0-2353-9799 F.0-2353-9846

วันที่ 17/05/66
Date
เลขที่ใบกำกับ
Order No. IV6605372
พนักงานขาย
Sales Person 001.3-คุณกานกานาฎ
กำหนดชำระเงิน
Term 60
ครบกำหนด
Due Date 16/07/66

IV6603245./1

Code	Description	Quantity	Unit	Price	Amount
6-454287****	หลอดเก็บเลือดระบบสุญญากาศ บรรจุสารกันเลือดแข็งตัว ชนิด K3 EDTA(จุกสีม่วง) 3 ML.	72,400	หลอด		
6-454333****	หลอดเก็บเลือดระบบสุญญากาศ บรรจุสารกันเลือดแข็งตัว Sodium citrate 3.2%(จุกสีฟ้า) REF:1CR4-027SC	15,600	หลอด		
6-454231****	หลอดเก็บเลือดระบบสุญญากาศ บรรจุสารเร่งให้เลือดแข็งตัว Sodium Fluoride(จุกสีเทา) 2 ML.	31,700	หลอด		
5-450530****	หลอดเก็บเลือดสำหรับเด็ก MINICOLLECT EDTA K3 TUBE 0.5 ML จุกสีม่วง(100'S)	450	หลอด		



สำเนาถูกต้อง

(Signature)

มีด ตก ยกเว้น E. & O. E

รวมเงิน Sub Total	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม V.A.T.	
ยอดเงินสุทธิ Net Total	

- หากสินค้าตามใบส่งสินค้านี้ มีการแตกหัก ขาดหรือ บกพร่องประการใด โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 7 วัน มิฉะนั้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
- สินค้าตามรายการดังกล่าวข้างต้น ยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขาย จนกว่าบริษัทฯ จะได้รับการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
- ใบกรณีชำระหนี้ด้วยเช็ค โปรดส่งจ่ายและติดคร่อมในนาม บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด เท่านั้น

ผู้รับของ/Receiver

ผู้ส่งของ/Delivered By

ผู้รับเงิน/Collector

ผู้จัดการ/Manager


ได้รับสินค้าตามรายการถูกต้องแล้ว

วันที่/Date

วันที่/Date

วันที่/Date

(Signature)
(นางอมรารัตน์ จรุงกิจวงศ์)-ผู้รับมอบอำนาจ

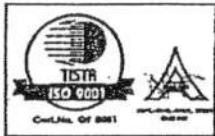

บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด
Bangkok Inter Products Co., Ltd.

FM 04-04

วันที่บังคับใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2564

Issue ที่ 4

สำนักงานใหญ่ : 91/247-251 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
Head Office : 91/247-251 Suwinthawong Road, Minburi, Minburi, Bangkok 10510
Tel: (662) 543-7430-5 Fax: (662) 543-7900 E-mail: info@b-i-p.co.th website: www.b-i-p.co.th

เอกสารออกเป็นชุด

ชื่อสินค้าที่ E-mail : adminbip@b-i-p.co.th
E-mail : bip002537@gmail.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105537110503

ใบกำกับภาษี
TAX INVOICE

ต้นฉบับ
ORIGINAL

ลูกค้า 02-ต 001 TAX ID: 0994000160437 สำนักงานใหญ่
ชื่อลูกค้า โรงพยาบาล ตากสิน
ที่อยู่ 543 ถนนสมเด็จพระเจ้าพระยา แขวงคลองสาน
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
หมายเลข T.O-2437-0123 F.O-2437-6605

วันที่ 28/01/65
Date
เลขที่ใบกำกับ IV6501499
Order No.
พนักงานขาย 001.3-คุณรุ่งตะวัน
Sales Person
กำหนดชำระเงิน 60
Term
ครบกำหนด 29/03/65
Due Date

IV6302429.

รหัสสินค้า Product Code	รายละเอียด Description	จำนวน Quantity	หน่วย Unit	ส่วนลด Discount	จำนวนเงิน Amount
i-454287****	VACUETTE EDTA K3 TUBE 3 ML (TR-L)(50'S) LOT.D191237D, EXP.2021-04-12	36 RACK			
i-450530****	MINICOLLECT EDTA K3 TUBE 0.5 ML(100'S) LOT.A19043AN, EXP.2020-09-18	50 RACK			2.-
<p>ใบสั่งซื้อเลขที่ ธจ.5/63 -ผลิตภัณฑ์ของบริษัท GREINERBIO-ONE, GmbH ประเทศ AUSTRIA -บริษัทฯ เป็นผู้แทนจำหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทย -ไม่มีผลิตในประเทศไทย -ไม่มี มอก. NR.295/046, PI630227, (SO6302238) แจ้งที่ห้องธนาคาร โลหิตวิทยา ชั้น6 ***HAND IV6302429.*** ผิด ตก ยกเว้น E & O.E</p>					



สำเนาถูกต้อง
อภิมุข

รวมเงิน Sub Total		0
ภาษีมูลค่าเพิ่ม V.A.T. 7.0%		0.00
ยอดเงินสุทธิ Net Total		0.00

ผู้รับของ/Receiver ผู้ส่งของ/Delivered By ผู้รับเงิน/Collector ผู้จัดการ/Manager


ได้รับสินค้าตามรายการถูกต้องแล้ว

วันที่/Date

วันที่/Date

วันที่/Date

(นางอมรพรรณ จรุงกวีวงศ์)-ผู้รับมอบอำนาจ

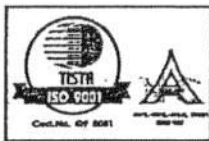

บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด
Bangkok Inter Products Co., Ltd.

FM 04-04

วันที่บังคับใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2564

Issue ที่ 4

สำนักงานใหญ่ : 91/247-251 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
Head Office : 91/247-251 Suwinthawong Road, Minburi, Minburi, Bangkok 10510
Tel: (662) 543-7430-5 Fax: (662) 543-7900 E-mail: info@b-i-p.co.th website: www.b-i-p.co.th

เอกสารออกเป็นชุด

ชื่อสินค้าที่ E-mail : adminbip@b-i-p.co.th
E-mail : bip002537@gmail.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105537110503

ใบกำกับภาษี
TAX INVOICE

ต้นฉบับ
ORIGINAL

ผู้ลูกค้า 02-ศ 007.3TAX ID: 0994000158378 สำนักงานใหญ่
ชื่อลูกค้า โรงพยาบาล ศิริราช (ฝ่ายเภสัชกรรม)
ที่อยู่ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพฯ 10700
หมายเลข T.0-2419-9420

วันที่ 05/01/65
Date
เลขที่ใบกำกับ IV6501020
Order No.
พนักงานขาย 001.1-คุณสุมาลี
Sales Person
กำหนดชำระเงิน 30
Term
ครบกำหนด 04/02/65
Due Date

รหัสสินค้า Product Code	รายละเอียด Description	จำนวน Quantity	หน่วย Unit	ส่วนลด Discount	จำนวนเงิน Amount
-450530****	MINICOLLECT EDTA K3 0.5 ML (100'S)LOT.A210949U, EXP.2023-03-05	5 RACK			
-450534****	MINICOLLECT PLAIN TUBE 1 ML (100'S)LOT.A211048L, EXP.2023-04-09	4 RACK			
-456043****	SAFETY CAP EDTA K2 TUBE 6 ML. (50'S)LOT.D210835Y, EXP.2023-02-04	80 RACK			
-456043****	SAFETY CAP EDTA K2 TUBE 6 ML. (50'S)LOT.D210534L, EXP.2022-11-01	60 RACK			
-454411****	SAFETY CAP EDTA K2 TUBE 3 ML. (50'S)LOT.D211036R, EXP.2023-02-08	48 RACK			
-454056****	SAFETY CAP LITHIUM HEPARIN 4ML. (50'S)LOT.D2111368, EXP.2023-03-05	48 RACK			
ผิด ตก ยกเว้น E & O.E					



สำนักงานใหญ่

Signature

หากสินค้าตามใบส่งสินค้านี้ มีการแตกหัก ชำรุด หรือ บกพร่องประการใด โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 7 วัน
มิฉะนั้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
สินค้าตามรายการดังกล่าวข้างต้น ยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขาย จนกว่าบริษัทฯ จะได้รับการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
ใบกรณีชำระหนี้ด้วยเช็ค โปรดส่งจ่ายและติดคร่อมในนาม บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด เท่านั้น

รวมเงิน Sub Total	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม V.A.T.	
ยอดเงินสุทธิ Net Total	

ผู้รับซื้อ/Receiver ได้รับสินค้าตามรายการถูกต้องแล้ว	ผู้ส่งของ/Delivered By	ผู้รับเงิน/Collector	ผู้จัดการ/Manager Signature
วันที่/Date	วันที่/Date	วันที่/Date	(นางอมรพรรณ จรุงศิริวงศ์)-ผู้รับมอบอำนาจ



บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด
Bangkok Inter Products Co., Ltd.

FM 04-04
วันที่บังคับใช้ 1 มีนาคม 2566
Issue ที่ 4

โรงงานใหญ่ : 91/247-251 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
1 Office : 91/247-251 Suwinthawong Road, Minburi, Minburi, Bangkok 10510
(662) 543-7430-5 Fax : (662) 543-7900 E-mail: info@b-i-p.co.th website : www.b-i-p.co.th

เอกสารออกเป็นชุด

อีเมลค่าที่ E-mail : adminbip@b-i-p.co.th
E-mail : bip002537@gmail.com

ใบกำกับภาษี
TAX INVOICE

สำเนา
COPY

ประจำตัวผู้เสียภาษี 0105537110508

ลูกค้า 02-ว 001 TAX ID: 0994000166028 สำนักงานใหญ่
ลูกค้า คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เลข 681 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10210
โทร T.0-2244-3000 F.0-2241-4388

วันที่ 18/08/66
Date
เลขที่ใบกำกับ IV6608377
Order No.
พนักงานขาย 001.1-คุณสุมาลี
Sales Person
กำหนดชำระเงิน 60 วัน
Term Day
ครบกำหนด 17/10/66
Due Date

รหัสสินค้า Product Code	รายละเอียด Description	จำนวน Quantity	หน่วย Unit	ส่วนลด Discount	รวมเงิน Amount
50537****	Minicollect Lithium Heparin tub 1 ml 13070020 LOT.A221135V, EXP.2024-05-02	600	หลอด		
50530****	Minicollect EDTA K3 tube 0.5ml. 2,000 หลอด 13070019 LOT.A23033BE, EXP.2024-08-30 ใบสั่งซื้อเลขที่ 3C328-02/2566 -ผลิตโดยที่ของบริษัท GREINERBIO-ONE, GmbH ประเทศ AUSTRIA -บริษัท เป็นผู้แทนจำหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทย -ไม่มีผลิตในประเทศไทย -ไม่มี มอก.	2,000	หลอด		



สำเนาถูกต้อง



0330/098, PI660818

การที่ 1 ส่งที่ คุณดาว/ห้องเคมี

การที่ 2 ส่งที่ คุณอรนุช/ห้องเจาะเลือด

มีด ตก ยกเว้น E & O. E

รวมเงิน
Sub Total

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
V.A.T.

ยอดเงินสุทธิ
Net Total

สินค้าตามใบส่งสินค้านี้ มีการแตกหัก ขาด หรือ บกพร่องประการใด โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 7 วัน
นับ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

หากตามรายการดังกล่าวข้างต้น ยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของฝ่ายขาย จนกว่าบริษัทฯ จะได้รับการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
กรณีชำระเงินด้วยเช็ค โปรดส่งจ่ายและขีดคร่อมในนาม บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด เท่านั้น

ผู้รับรอง/Receiver

ผู้ส่งของ/Delivered By

ผู้รับเงิน/Collector

ผู้จัดการ/Manager

รับสินค้าตามรายการถูกต้องแล้ว

Date

วันที่/Date

วันที่/Date

(นางฉัตรพรณี จรุงศิริวงศ์) -ผู้รับมอบอำนาจ



บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด
Bangkok Inter Products Co., Ltd.

FM 04-04
วันที่บังคับใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2564
Issue ที่ 4

พนักงานใหญ่ : 91/247-251 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
Head Office : 91/247-251 Suwinthawong Road, Minburi, Minburi, Bangkok 10510
Tel: (662) 543-7430-5 Fax: (662) 543-7900 E-mail: info@b-i-p.co.th website: www.b-i-p.co.th

เอกสารออกเป็นชุด

ชื่อสินค้าที่ E-mail : adminbip@b-i-p.co.th
E-mail : bip002537@gmail.com

ใบกำกับภาษี
TAX INVOICE

ต้นฉบับ
ORIGINAL

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105537110503

รหัสลูกค้า 02-ฉ 001 TAX ID: 0994000255381 สำนักงานใหญ่
ชื่อลูกค้า โรงพยาบาล พุทธโสธร
ที่อยู่ 174 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
หมายเลข T.038-814375, 038-514722, F.038-511633

วันที่ 23/02/65
Date IV6502392
เลขที่ใบกำกับ Order No.
พนักงานขาย 007-คุณสุวรรณี
Sales Person
กำหนดชำระเงิน 60
Term
ครบกำหนด Due Date 24/04/65

รหัสสินค้า Product Code	รายละเอียด Description	จำนวน Quantity	หน่วย Unit	ส่วนลด Discount	จำนวนเงิน Amount
-450530****	MINICOLLECT EDTA K3 TUBE 0.5 ML	3,500	TUBE		
-450537****	MINICOLLECT LITHIUM HEPARIN TUBE 1 ML	2,800	TUBE		
-50 8722***	กระป๋องหึ่งเข็มสีเหลือง สีแดง ขนาด 3.5 ลิตร	40	ใบ		



สำเนาถูกต้อง

DR.092/017, PI650223,
ฝั่งของที่ห้องแล็บ ชั้น5

ผิด ตก ยกเว้น E & O. E.

รวมเงิน
Sub Total

7.0%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
V.A.T.

ยอดเงินสุทธิ
Net Total

- หากสินค้าตามใบส่งสินค้านี้ มีการแตกหัก ชำรุด หรือ บกพร่องประการใด โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 7 วัน มิฉะนั้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
- สินค้าตามรายการดังกล่าวข้างต้น ยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขาย จนกว่าบริษัทฯ จะได้รับการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
- ใบกรณีชำระหนี้ด้วยเช็ค โปรดส่งจ่ายและติดคร่อมในนาม บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด เท่านั้น

ผู้รับของ/Receiver

ผู้ส่งของ/Delivered By

ผู้รับเงิน/Collector

ผู้จัดการ/Manager

ได้รับสินค้าตามรายการถูกต้องแล้ว

วันที่/Date

วันที่/Date

วันที่/Date

(นางอมรรัตน์ จรุงศิริวงศ์) ผู้รับมอบอำนาจ



บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด
Bangkok Inter Products Co., Ltd.

FM 04-04
วันที่บังคับใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2564
Issue ที่ 4

สำนักงานใหญ่ : 91/247-251 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
Head Office : 91/247-251 Suwinthawong Road, Minburi, Minburi, Bangkok 10510
Tel: (662) 543-7430-5 Fax : (662) 543-7900 E-mail: info@b-i-p.co.th website : www.b-i-p.co.th

เอกสารออกเป็นชุด

สั่งซื้อสินค้าที่ E-mail : adminbip@b-i-p.co.th
E-mail : bip002537@gmail.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105537110503

ใบกำกับภาษี
TAX INVOICE

ต้นฉบับ
ORIGINAL


รหัสลูกค้า Code 02-ช 003 TAX ID: 0994000423063 สำนักงานใหญ่
นามลูกค้า Name คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่อยู่ Address 110 ถนนเอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
หมายเหตุ Remark T.053-941301, T.053-945337, T.053-945242, 945245

วันที่ Date 05/01/66
เลขที่ใบกำกับ Order No. IV6601019
พนักงานขาย Sales Person 008-คุณเมกัสวารณ
กำหนดชำระเงิน Term 60
ครบกำหนด Due Date 06/03/66

รหัสสินค้า Product Code	รายละเอียด Description	จำนวน Quantity	หน่วย Unit	ส่วนลด Discount	จำนวนเงิน Amount
05-450537***	หลอดเก็บเลือดสำหรับเด็ก ชนิด LITHIUM HEPARIN MINICOLLECT LITHIUM HEPARIN TUBE ความจุ 1 ML (TR-L) (50'S)	108 PACK			
05-450530***	หลอดเก็บเลือดสำหรับเด็ก ชนิด EDTA (MINICOLLECT EDTA K3 TUBE 0.5 ML.) (50'S) เลขที่ อว 8393(8).3 พ.จพ/66/00976	120 PACK			
*OR.168/059	PI660105				
*ส่งของที่ แผนภาพที่สุด	ผิด ตก ยกเว้น E & O E				



สำเนาถูกต้อง

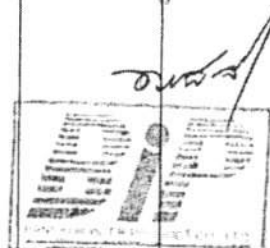

รวมเงิน Sub Total	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม V.A.T.	7.0%
ยอดเงินสุทธิ Net Total	

1. หากสินค้าตามใบส่งสินค้านี้ มีการแตกหัก ชำรุด หรือ บกพร่องประการใด โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 7 วัน มิฉะนั้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
2. สินค้าตามรายการดังกล่าวข้างต้น ยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขาย จนกว่าบริษัทฯ จะได้รับการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
3. ในกรณีชำระเงินด้วยเช็ค โปรดสั่งจ่ายและขีดพร้อมในนาม บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด เท่านั้น

ผู้รับของ/Receiver ได้รับสินค้าตามรายการถูกต้องแล้ว	ผู้ส่งของ/Delivered By	ผู้รับเงิน/Collector	ผู้จัดการ/Manager นางอมรภาภรณ์ จรุงศิริวงศ์-ผู้รับมอบอำนาจ
วันที่/Date	วันที่/Date	วันที่/Date	